




Topische Wundlösungen

Die nachfolgenden topischen Lösungen sind mit der V.A.C. VeraFlo™ Therapy kompatibel.*

WIRKSTOFF	MARKENNAME	HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG MIT DER V.A.C. VERAFLO™ THERAPY
Hypochlorit Lösungen (z.B. Hypochlorid Säure, Natriumhypochlorit)	Dakin's® Lösung, Dermacyn®	Konzentration < 0,125%. Wenige Instillationszyklen. Kürzestmögliche Einwirkzeit wählen.
Sulfur Lösungen (Sulfonamide)	Mafenid Azetat, Sulfamylon	Produktspezifische Informationen zur Instillationslösung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Packungsbeilage
Silbernitrat (0.5%)	Verschiedene	Silbernitrat ist lichtempfindlich. Den V.A.C. VeraLink Instillationsschlauch vor Licht während der Anwendung von Silbernitrat schützen.

Der richtige
Baustein für die
Wundheilung.

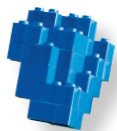

V.A.C.Ulta™ Therapy System ist
kompatibel mit unterschiedlichen
topischen Lösungen für
unterschiedlichen Wunden.



Weitere Informationen über die Vorteile der V.A.C. VeraFlo™ Therapy erhalten Sie von KCI.

Alle aufgeführten Lösungen sind von der FDA für die topische Wundanwendung zugelassen. Konsultieren Sie für spezifische Details den Hersteller. Das V.A.C.Ulta™ Therapy System ist für die Anwendung topischer Wundlösungen indiziert.

HINWEIS: Spezielle Indikationen, Kontraindikationen, Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen existieren für die KCI Produkte und Therapien. Bitte konsultieren Sie einen Arzt und lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Anwendung.

©2011 KCI Licensing, Inc. All rights reserved. The Mega BLOKS blocks are used with the permission of Mega Brands Inc. Drug trademarks are the property of their respective owners. KCI, Vacuum Assisted Closure™ (V.A.C.), V.A.C.Ulta, V.A.C. VeraLink, and V.A.C. VeraFlo are trademarks of KCI licensing, Inc., its affiliates and/or licensors. This material is intended for healthcare professionals only. DSL#11-0018.US (01/2011)



Topische Wundlösungen

Die nachfolgenden topischen Lösungen sind mit der V.A.C. VeraFlo™ Therapy kompatibel.*



WIRKSTOFF	MARKENNAME	HINWEISE FÜR DIE BENUTZUNG MIT DER V.A.C. VERAFLO™ THERAPY
Polyhexanide	Prontosan® Lavasept®	Produktspezifische Informationen zur Instillationslösung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Packungsbeilage
Kationische Lösungen (Octenidin, Benzalkoniumchlorid)	Octenilin® Wundspüllösung, Zephiran®	Produktspezifische Informationen zur Instillationslösung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Packungsbeilage
Isotonische Lösungen	Natriumchlorid (NaCl), Ringer-Lactat-Lösung	Produktspezifische Informationen zur Instillationslösung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Packungsbeilage

*Bezieht sich auf reine KCI Inhouse Testungen. Lesen Sie vor der Anwendung die Kennzeichnung und Produktinformation der jeweiligen Lösung oder kontaktieren Sie den Hersteller. Die hier aufgeführten Produkte und Empfehlungen haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die medizinischen Ergebnissen können je nach Anwendungsbereich variieren.